

BATERIE 312 HPX

DATE TEHNICE

SPECIFICATIE TEHNICA:

Marca/Produs de: Rayovac S.U.A.

Produs in: Marea Britanie

Tip: Zn-Aer , baterii speciale pentru aparate auditive, asigurand un sunet aproape fara distorsiuni

Codificare: 312ZA, 312, PR41, B3124, B347PA, AC312E, HA312, 312AU, 312HPX, s312, p312, ZA312, PR312, AC312, 7002ZD

Gama: Extra (fosta gama Extra Advanced)

Tehnologii: Active Core Plus si Sound Fusion Technology

Tensiune: 1.45 V (noua gama Extra)

Capacitate: 190 mAh

Impedanta/rezistenta interna: <6.5 Ohm @ AC 1000 Hz

Dimensiune: (Ø) 7.7-7.9 mm x (h) 3.3-3.6 mm



Greutate: 0.54 grame/baterie

Durata conform IEC/ANSI Standard: 89 ore – 2mA background, 10mA 100ms pulsuri o data la fiecare 2h, 12 h/zi pana la 1.05V la 21°C si 50% R.H. (umiditate)


Durata conform IEC/ANSI Wireless: 57 ore – 2mA background 45 minute, 5mA 15 min. puls o data pe ora, 12 h/zi pana la 1.1V la 21°C si umiditate 50% R.H.

Durata standard de depozitare: 4 ani in stare sigilata, la 21°C (dupa desigilare incep sa se auto-descarce)

Activare si utilizare: Inlaturati folia de plastic care acopera orificiile pentru aer. Inainte de a introduce bateria in aparat lasati-o un minut in aer liber pentru a-i asigura o activare corespunzatoare. Compartimentul bateriei trebuie sa permita o oxigenare adecvata

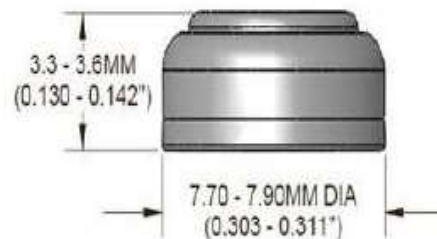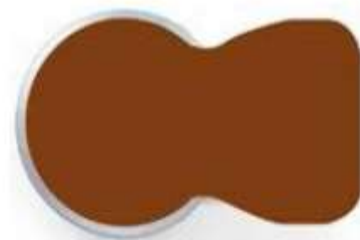

DIMENSIONS SHOWN ARE IEC STANDARDS
FOR ENGINEERING TOLERANCES
CONTACT RAYOVAC.

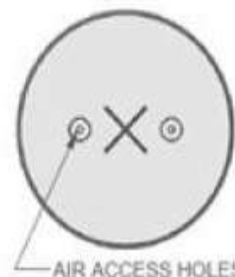

AIR ACCESS HOLES

Temperatura de utilizare: -10°C ... +50°C

Temperatura de stocare: +10°C ... +30°C, ferite de razele soarelui

Durata garantata de depozitare: 4 ani, stocare in stare sigilata la 21°C

Ambalare: 6 buc/blister, 10 blistere/cutie (pretul este pentru o cutie cu 60 de baterii)

Standarde aplicabile: ANSI/NEDA - 7002ZD, IEC - PR41 / IEC 60086-1, IEC 60086-2 / ANSI C18.1M Parts 1 & 2

Protectia mediului: Bateria nu contine Mercur! Bateriile uzate nu se arunca la cosul de gunoi, ci se depun in urnele de colectare baterii uzate din marile magazine.

