

ÎNCĂRCĂTOR WIDEX MRR2D



RACTERISTICI PRINCIPALE

- Compact și portabil; deconectați USB-ul, închideți capacul și puneți-l în buzunar sau geantă.
- Poate fi alimentat de la mai multe surse de alimentare.
- Utilizare intuitivă, susținută de indicatoare luminoase care afișează nivelul de încărcare al aparatului auditiv.
- Design inteligent protejat, cu capac cu balamale ușor de utilizat.

DESCRIERE

Încărcătorul WIDEX mRIC este conceput pentru a încărca două aparate auditive WIDEX MRR2D.

Încărcătorul are un compartiment de încărcare pentru fiecare aparat auditiv și două indicatoare luminoase care arată starea de încărcare a fiecărui aparat auditiv. Fiecare aparat auditiv poate fi încărcat individual, în funcție de starea de încărcare a acestuia. Aceasta înseamnă că, dacă un aparat auditiv este complet încărcat și plasat în încărcător, acesta nu se va încărca. Cu toate acestea, dacă celălalt aparat auditiv nu este încărcat, acesta se va încărca.

PROPRIETĂȚI

Culoare:	Negru
Dimensiuni:	Înălțime: 52 mm Lățime: 85 mm Adâncime: 29 mm
Greutate:	aproximativ 70 g
Capacitate	Poate conține un set de aparate auditive. Poate încărca aparatele auditive individual. Pentru timpul de încărcare și indicații, consultați Instrucțiunile de utilizare pentru încărcătorul WIDEX MRR2D
Intervalul de temperatură, umiditate și presiune atmosferică de funcționare:	0 °C (32 °F) până la 30 °C (86 °F), 10 %-95 % rH și 750 până la 1060 mbar.
Depozitare și transport	-20 °C (-4 °F) până la 50 °C (122 °F), 10 %-95 % rH și 750 până la 1060 mbar

ALIMENTARE

Intrare	Tip: DC, stabilizat 5V +/- 5% Curent minim: 500 mA Conector: mufă micro USB Se pot utiliza diferite surse de alimentare. Aparatul auditiv se poate încălzi în timpul încărcării.
---------	--


ELIMINARE

- Nu aruncați încărcătorul (nou sau uzat) împreună cu deșeurile menajere obișnuite.
- Încărcătorul trebuie eliminat ca deșeu electronic sau chimic, în conformitate cu reglementările locale.

Încărcătorul pe scurt

Încărcătorul are un compartiment de încărcare pentru fiecare aparat auditiv și două indicatoare luminoase care arată starea de încărcare a aparatelor auditive.

1. Port micro USB
2. Puncte de încărcare
3. Indicatori luminoși
4. Capac cu balamale

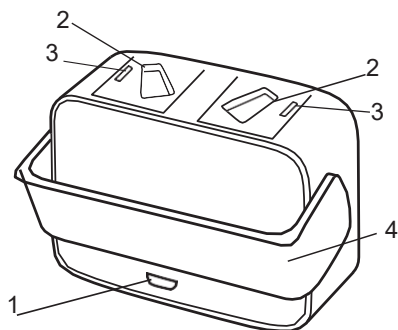

ÎN CUTIE

În cutia de prezentare veți găsi:

- Un încărcător
 - Un adaptor de alimentare
 - Un cablu USB
-