

WIDEX MOMENT™ sRIC R D CU V.2 RIC M-RECEIVER




WIDEX sRIC R D face parte din familia WIDEX MOMENT™. Construit în jurul platformei WIDEX MOMENT™ pentru a oferi un sunet mai bun prin TruAcoustics™ și paradigma revoluționară Widex PureSound™, totul pe un cip nou-nouț, cu o conectivitate mai bună.

WIDEX sRIC R D depășește provocările legate de adaptarea aparatelor auditive deschise/ventilate pentru pierderi auditive ușoare până la moderate, cu ajutorul paradigmei Widex Pure-Sound™.

sRIC este alimentat de o baterie litiu-ion încorporată și încărcat fără fir de încărcătorul sRIC corespunzător sau de modelul Charge n Clean. WIDEX oferă un design complet nou și un factor de formă al aparatului auditiv în culori monocrome. Suportul pentru aplicații este oferit prin conexiunea Bluetooth directă la iOS și Android, care permite și conectarea la TV PLAY.

- Conectivitate wireless mobilă directă (2,4 GHz)
- Compatibil cu dispozitivele de asistență auditivă DEX
- 4 niveluri de performanță: 440/330/220/110
- Utilizează receptorul V.2 Easyware M
- Funcționează cu un receptor fizic mai mic și mai puternic, care acoperă o gamă mai largă de racorduri
- Alimentat de o baterie reîncărcabilă litiu-ion
- Pierdere auditivă de la ușoară la moderată
- Clasă de protecție IP68

DOMENIU DE APLICARE RECOMANDAT

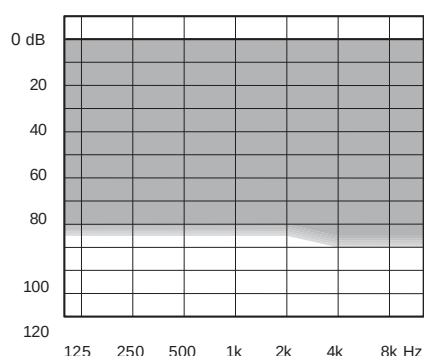

TEHNOLOGIE STANDARD

- Platforma WIDEX MOMENT™ cu Personal Gain Integrator și tehnologia ZeroDelay™
- Widex PureSound™ — un nou paradigma în procesarea sunetului
- TruAcoustics™ pentru un sunet și o potrivire îmbunătățite
- Noi tonuri Zen/Relax în aparatul auditiv.

CARACTERISTICI CHEIE	440	33	220	11
Performanță	*****	*****	****	**
Procesarea și reglarea fină a canalelor	15	12	10	6
Widex PureSound™ cu tehnologia ZeroDelay™	.	.	.	.
TruAcoustics™ cu integrator de câștig personal	.	.	.	.

CONECTIVITATE

Control 2,4 GHz (Android și iOS)	.	.	.	.
Streaming audio 2,4 GHz (iOS)*	.	.	.	.
WidexLink către dispozitive de asistență auditivă DEX**	.	.	.	.

APLICAȚII PENTRU iOS ȘI ANDROID


Aplicația MOMENT cu SoundSense Learn	.	.	.	.
Aplicația MOMENT	.	.	.	.
Aplicația TONELINK	.	.	.	.
Aplicația COM-DEX	.	.	.	.

CARACTERISTICI


Manager de adaptare	.	.	.	.
Analizor de sunete fluide (clase de sunete)	11 (IE)	7 (IE)	4	3
Programe	5	4	3	3
Smartwind Manager	.	.	.	.
Amplificare de înaltă frecvență	.	.	.	.
Amplificator de voce RT	RT/IE	IE	.	.
Pinna digitală	.	.	.	.
Localizator HD	.	.	.	.
TruSound Softener	.	.	.	.
Adaptare SoundSense	.	.	.	.
Control preferințe	.	.	.	.
Buton programabil***	.	.	.	.
Reducere a zgomotului la nivel redus	.	.	.	.
Reducerea zgomotului	.	.	.	.
Zen/Relaxare	.	.	.	.
Extensor de audibilitate	.	.	.	.

*Pregătit pentru streaming direct Android. **Include și dispozitive de asistență auditivă DEX: TV-DEX, COM-DEX, RC-DEX, FM+ DEX, TV-PLAY. ***Programabil: ca buton de program și comutator pomt/oprit, ca buton de reglare a sunetului și comutator pomt/oprit, ca comutator pomt/oprit dedicat.


PUTERE MAXIMĂ - SIMULATOR DE URECHE

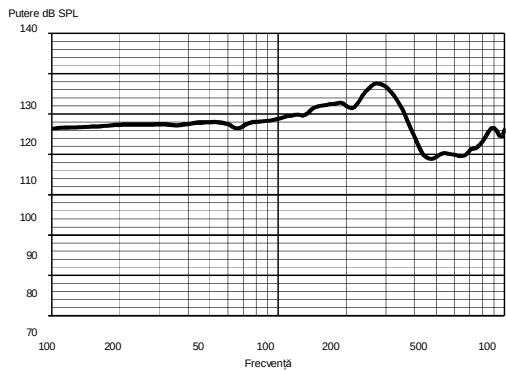


PUTERE MAXIMĂ - CUPPER 2CC

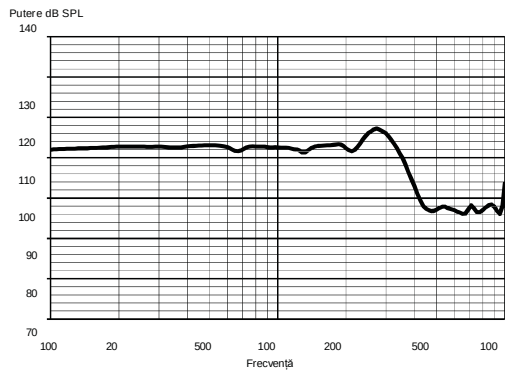

IEȘIRE - SIMULATOR DE URECHE

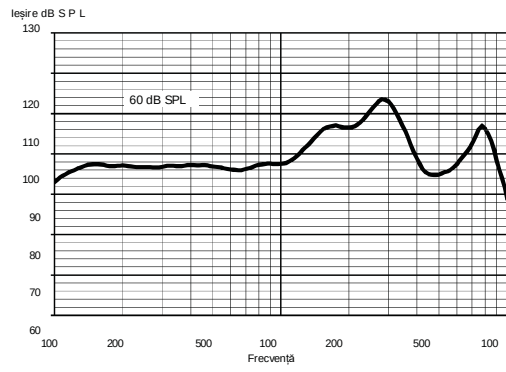

IEȘIRE - CUPPER 2CC

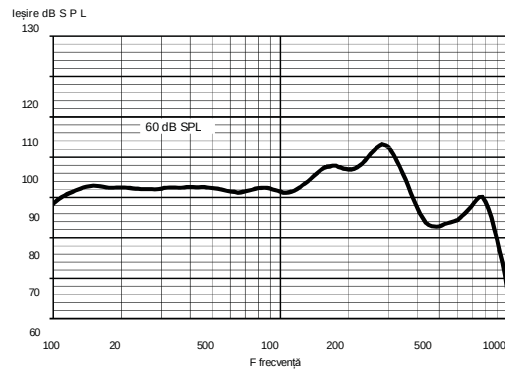

Date tehnice:

Date tipice obținute prin măsurători standard ale tonurilor pure. Aparatul auditiv setat la Compass Reference Test Gain, dacă nu se specifică altfel. Măsurat folosind un cuplaj ITE standard fără protecție împotriva cerii. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați Widex la global.widex.com.

		SIMULATOR DE URECHE IEC 60118-0:1983 + A1:1994	CUPPER 2CC IEC 60118-0:2015 , ANSI S3.22-2014
OSPL90	1600 Hz Vârf Medie	122 dB SPL 128 dB SPL 120 dB SPL	113 dB SPL 117 dB SPL 114 dB SPL
Putere acustică (intrare 60 dB SPL)	1600 Hz Vârf Medie	107 dB SPL 114 dB SPL 100 dB SPL	98 dB SPL 103 dB SPL 97 dB SPL
Câștig maxim (Intrare 50 dB SPL, câștig maxim Compass)	1600 Hz Vârf mediu	67 dB 69 dB 64 dB	58 dB 61 dB 57 dB
Gama de frecvențe acustice		100 Hz - 10000 Hz	100 Hz - 9200 Hz
Distorsiune armonică (tipică)	500 Hz 800 Hz 1600 Hz	<2 <2 <2	<2 <2 <2
Zgomot de intrare echivalent		19 dB SPL	20 dB SPL
Consum baterie (standby)		1,18 mA	1,18 mA
Consum baterie*		1,25 mA	1,28 mA
Durata de viață a bateriei* Baterie reîncărcabilă litiu-ion		40	40 h
Imunitate la telefoane mobile (IEC 60118-13:2019 Ed. 5.0, ANSI C63.19:2019)		IEC: Spectatori și utilizatori: Conform	ANSI: Conform

*Durata de viață a bateriei în situații reale depinde, printre altele, de funcțiile aparatului auditiv utilizate și de timpul de redare. Nu modificați acest echipament fără autorizarea producătorului. Piese de schimb și instrucțiuni pentru repararea corectă pot fi obținute de la Widex.

WIDEX MOMENT™ sRIC RD CU V.2 RIC P-RECEIVER



WIDEX sRIC RD face parte din familia WIDEX MOMENT™. Construit în jurul platformei WIDEX MOMENT™ pentru a oferi un sunet mai bun prin TruAcoustics™ și paradigma revoluționară Widex PureSound™, totul pe un cip nou-nouț, cu o conectivitate mai bună.


Montarea sRIC este mai ușoară ca niciodată, datorită TruAcoustics™, care oferă un sunet personalizat mai puternic.

sRIC este alimentat de o baterie litiu-ion încorporată și încărcat wireless de încărcătorul sRIC corespunzător sau de modelul Charge n Clean.

WIDEX oferă un design nou și un factor de formă al aparatului auditiv în culori monocrome. Suportul pentru aplicații este oferit prin conexiunea Bluetooth directă la iOS și Android, care permite și conectarea la TV PLAY.

- Conectivitate wireless mobilă directă (2,4 GHz)
- Compatibil cu dispozitivele de asistență auditivă DEX
- 4 niveluri de performanță: 440/330/220/110
- Utilizează receptorul V.2 Easyware P
- Funcționează cu un receptor fizic mai mic și mai puternic, care acoperă o gamă mai largă de potriviri
- Alimentat de o baterie reîncărcabilă litiu-ion
- Pierdere auditivă de la severă la profundă
- Clasă de protecție IP68

DOMENIU DE AJUSTARE RECOMANDAT

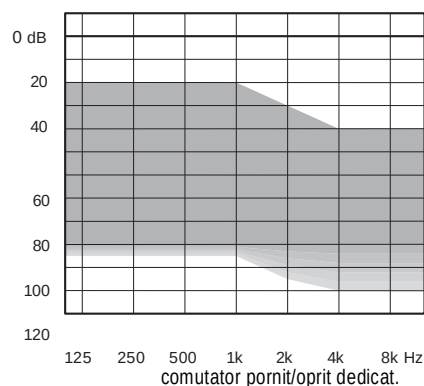

TEHNOLOGIE STANDARD

- Platforma WIDEX MOMENT™ cu Personal Gain Integrator și tehnologia ZeroDelay™
- Widex PureSound™ — un nou paradigma în procesarea sunetului
- TruAcoustics™ pentru un sunet și o potrivire îmbunătățite
- Noi tonuri Zen/Relax în aparatul auditiv.

CARACTERISTICI PRINCIPALE	440	3	220	11
Performanță	*****	*****	****	**
Procesarea și reglarea fină a canalelor	15	12	10	6
Widex PureSound™ cu tehnologia ZeroDelay™	•	•	•	•
TruAcoustics™ cu integrator de câștig personal	•	•	•	•

CONECTIVITATE

Control 2,4 GHz (Android și iOS)	•	•	•	•
Streaming audio 2,4 GHz (iOS)*	•	•	•	•
WidexLink către dispozitive de asistență auditivă DEX**	•	•	•	•

APLICAȚII PENTRU iOS ȘI ANDROID

Aplicația MOMENT cu SoundSense Learn	•	•	•	•
Aplicația MOMENT	•	•	•	•
Aplicația TONELINK	•	•	•	•
Aplicația COM-DEX	•	•	•	•

CARACTERISTICI


Manager de adaptare	•	•	•	•
Analizor de sunete fluide (clase de sunete)	11 (IE)	7 (IE)	4	3
Programe	5	4	3	3
Smartwind Manager	•			
Amplificare de înaltă frecvență	•			
Amplificator de voce RT	RT/IE	IE		
Pinna digitală	•	•		
Localizator HD	•	•	•	
TruSound Softener	•	•	•	
Adaptare SoundSense	•	•	•	
Control preferințe	•	•	•	•
Buton programabil***	•	•	•	•
Reducere a zgomotului la nivel redus	•	•	•	•
Reducerea zgomotului	•	•	•	•
Zen/Relaxare	•	•	•	•
Extensor de audibilitate	•	•	•	•

*Pregătit pentru streaming direct Android. **Include și dispozitive de asistență auditivă DEX: TV-DEX, COM-DEX, RC-DEX, FM+ DEX, TV-PLAY. ***Programabil: ca buton de program și comutator pornit/oprit, ca buton de reglare a sunetului și comutator pornit/oprit, ca


V.2 RIC P-RECEIVER

MRR4D


PUTERE MAXIMĂ - SIMULATOR DE URECHE

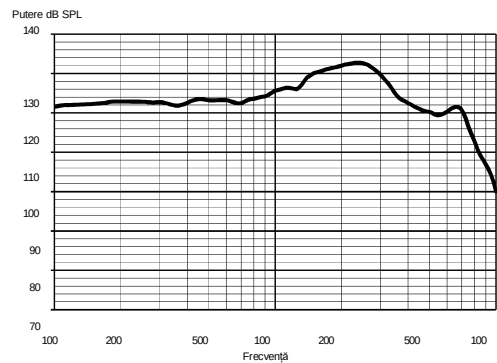


PUTERE MAXIMĂ - CUPPER 2CC

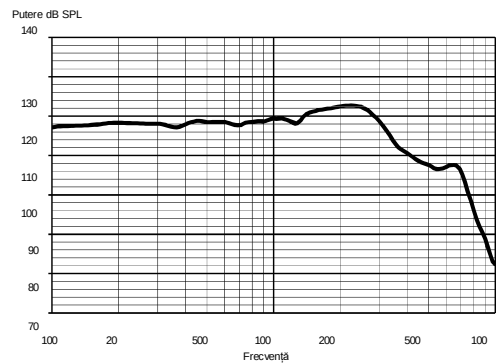

IEȘIRE - SIMULATOR DE URECHE

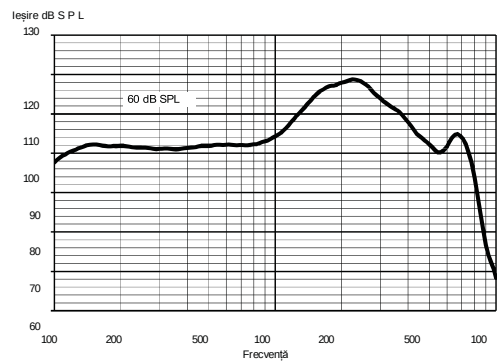

IEȘIRE - CUPPER 2CC

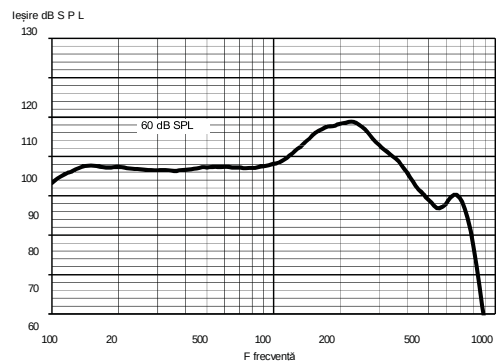

Date tehnice: Date tipice obținute prin măsurători standard ale tonurilor pure. Aparatul auditiv setat la Compass Reference Test Gain, dacă nu se specifică altfel. Măsurat folosind un cuplaj ITE standard fără protecție împotriva cerii. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați Widex la global.widex.com.

		SIMULATOR DE URECHE IEC 60118-0:1983 + A1:1994	CUPPER 2CC IEC 60118-0:2015 , ANSI S3.22-2014
OSPL90	1600 Hz Vârf Medie	131 dB SPL 133 dB SPL 127 dB SPL	122 dB SPL 123 dB SPL 121 dB SPL
Putere acustică (intrare 60 dB SPL)	1600 Hz Vârf Medie	116 dB SPL 119 dB SPL 108 dB SPL	107 dB SPL 109 dB SPL 104 dB SPL
Câștig maxim (Intrare 50 dB SPL, câștig maxim Compass)	1600 Hz Vârf Medie	68 dB 71 dB 69 dB	59 dB 65 dB 60 dB
Gama de frecvențe acustice		100 Hz - 8050 Hz	100 Hz - 7550 Hz
Distorsiune armonică (tipică)	500 Hz	<2	<2
	800 Hz	<2	<2
	1600 Hz	<2	<2
Zgomot de intrare echivalent		17 dB SPL	20 dB SPL
Consum baterie (standby)		1,27 mA	1,27 mA
Consum baterie*		1,43 mA	1,45 mA
Durata de viață a bateriei* (baterie reincărcabilă litiu-ion)		35	35
Imunitate la telefoane mobile (IEC 60118-13:2019 Ed. 5.0, ANSI C63.19:2019)		IEC: Spectatori și utilizatori: Conformitate	ANSI: Conform

*Durata de viață a bateriei în situații reale depinde, printre altele, de funcțiile aparatului auditiv utilizate și de timpul de redare.
Nu modificați acest echipament fără autorizarea producătorului. Piese de schimb și instrucțiunile pentru repararea corectă pot fi obținute de la Widex.